



# הוראות הפעלה

אקדח עיסוי מקצועי  
דגם: M4.2 MUSCLE GUN  
מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש



**סירינים**

להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

## **לקוח/ה יקר/ה,**

חברת סיריוס אלקטרוניקה, מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי, המולטימדיה והטיפוח. לנוחיותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.

**כתובת האתר: [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)**

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו:  
**אולם תצוגה ראשי:** רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה.  
**אולם התצוגה בשוהם:** רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם  
(ניתן להקליד ב- WAZE "סיריוס אלקטרוניקה שוהם")

### **מאפיינים:**

**בריאות** - מאיץ את החלמת הרקמות בשרירים, מסייע להקלה בנוקשות וכאבי השרירים ומשפר את טווח התנועה, מומלץ להשתמש בו לפני האימון לשיפור זרימת הדם וחימום השריר וגם לאחר האימון לשחרור ושיקום מהיר של שרירי הגוף.

מתאים לגברים ונשים כאחד לעיסוי רקמות עמוק, עיצוב הגוף והורדה במשקל.

**עוצמתי** - מנוע חזק ועוצמתי בעל ביצועים גבוהים עם 6 מהירויות לפי בחירה אישית לעיסוי עמוק ומקצועי והתאוששות השרירים.

**עיצוב** - בעל ידית ארגונומית רכה ונוחה במיוחד לכל חלקי הגוף מוגנת זיעה למניעת החלקות בעת השימוש. עשוי מחומרים חזקים מאוד לשמירה על המוצר מנפילות.

**שקט** - טכנולוגיית Super Silent שקט במיוחד לא יפריע לכם ולסובבים אתכם בעת השימוש.

**סוללה נטענת** - לשימוש אלחוטי של עד 60 דקות רצופות ללא חיבור לחשמל.

**נוח לשימוש** - כפתור הדלקה ON/ OFF פשוט וידידותי הכולל הגברת המהירויות השונות והצגה ע"י נוריות חיוי LED לפי רמות מהירות

**אביזרים נלווים** - ארבעה סוגי ראשים שונים נשלפים להחלפה מהירה לעיסוי באזורים השונים בגוף כגון: גב, זרועות, כתפיים, שרירי הצוואר, רגליים ועוד.

**\*עיסוי לגוף הינו טכניקה טיפולית, אך אינו מהווה תחליף לטיפול מוסמך ע"י רופא.  
\*עיסוי באזור הבטן לא מומלץ לנשים בהיריון ונשים בזמן מחזור.**


### **כלול באריזה:**

אקדח עיסוי  
4 ראשים מתחלפים  
הוראות הפעלה עברית ואנגלית  
אחריות שנה ע"י סיריוס  
אלקטרוניקה

### **מפרט טכני:**

6 רמות מהירות  
זמן סוללה עד 60 דקות  
מנוע עוצמתי  
שקע טעינה Type C  
15x9x4.5 ס"מ

# אקדח מסאג':

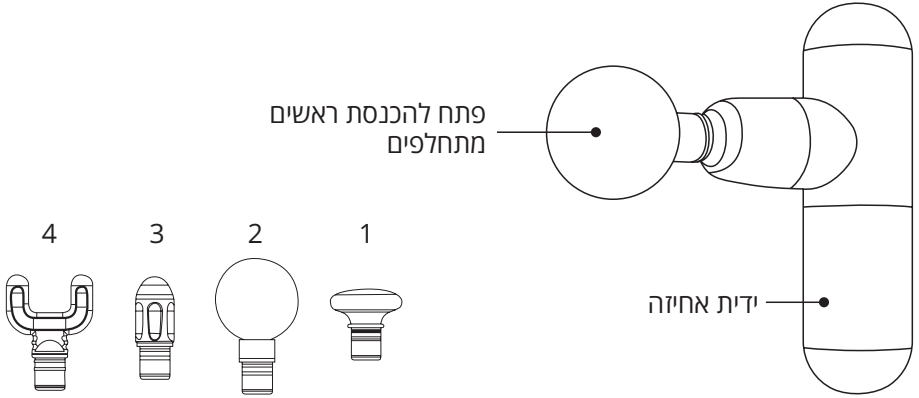

1. ראש עגול להרפיית השרירים
2. ראש קליע לעיסוי עמוק במפרקים והשרירים הקטנים
3. ראש שטוח לקבוצות השרירים הגדולות
4. ראש רחב U לאזור הכתפיים, הצוואר והגב


## פאנל ראשי:

לחצן הפעלה/כיבוי המכשיר - יש ללחוץ במשך 3 שניות עד שרואים את ארבעת הנורות לד הכחולות נדלקות להפעלת/כיבוי המכשיר.


לחצן הפעלת מנוע וכיוון מהירות: ישנם 6 רמות מהירות משתנות לבחירה.

ולאחר 6 לחיצות - נגיע שוב לעוצמה הבסיסית הראשונה. ציין מהירות משמאל לימין:

- א. נורה 1 - נדלק לציון הילוך ראשון - בסיסי
- ב. נורה 2 - נדלק לציון הילוך שני - נמוך
- ג. נורה 3 - נדלק לציון הילוך שלישי - בינוני
- ד. נורה 4 - נדלק לציון הילוך רביעי - גבוהה
- ה. נורה 5 - נדלק לציון הילוך רביעי - חזק
- ו. נורה 6 - נדלק לציון הילוך חמישי - עוצמתי

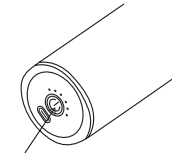

לחצן הגברת עוצמת מהירות

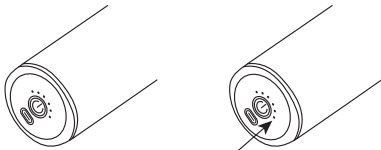


נורות חיווי המציגות את 6 מדי המהירות

## החלפת ראש עיסוי:

ישנם 4 צורות של ראשי עיסוי – הנשלפים וניתנים להחלפה

1. יש למשוך את הראש העיסוי משמאל לימין עד להוצאה בטוחה של ראש העיסוי.
2. יש לבחור ראש עיסוי ולהכניסו אל תוך פתח המכשיר ולראות שנכנס בבטחה.
3. סיום תהליך החלפת ראש העיסוי

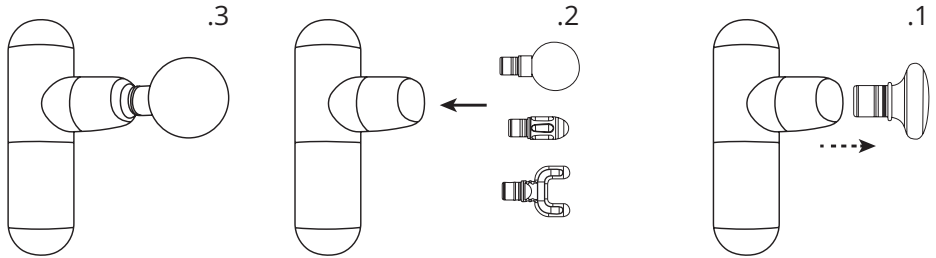

## הפעלה:

1. יש לטעון תחילה את המכשיר בשימוש ראשוני.
2. בהתבסס על האזור שברצונכם לעסות, בחרו בראש עיסוי והתקינו בחור העגול של המכשיר.
3. לחצו על לחצן ההפעלה.
4. המנוע יופעל, והאור מעל המנוע יציין כי המכשיר פועל במהירות הנמוכה ביותר.
5. לחצו על לחצן ההפעלה שוב כדי לעבור למהירות הבאה. ישנם 6 מצבי מהירות שונים.
6. לאחר הלחיצה הרביעית הגבוהה ביותר ארבעת נורות הLED יהיו דולקות, יש ללחוץ פעם אחת נוספת על מנת לעבור לרמה הבסיסית הנמוכה ביותר של המכשיר וחזרה לנוחיות המשתמש.
7. אחרי העיסוי, כבו את המכשיר, והכניסו לאריזתו לצורך השימור שלו.

## הצהרת אי אחריות:


לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא את ההוראות בקפידה. יש להשתמש במכשיר רק בהתאם להנחיות. אין ליצרן או סירוס אלקטרוניקה בע"מ אחריות משפטית במקרה שנעשה במכשיר שימוש שלא בהתאם להנחיות והוראות השימוש.

אין להשתמש במהירות ובלחץ גבוהים ואין להשתמש במכשיר ללא אישור רפואי אם: את בהריון. אנשים חולי סכרת וסיבוכים שלה כגון נטורופתיה או נזק לרשתית, אם יש לך קוצב לב, אם עברת ניתוח לאחרונה, או אם אתה סובל מאפילפסיה או ממיגרנה, פריצת דיסק, דלקת בחוליות, אם הוחלף לך מפרק לאחרונה או שיש לך התקן תוך רחמי, או אם אתם סובלים מבעיות בריאות. מבוגרים שבריאותם לקויה וילדים צריכים להיזהר בזמן השימוש במכשיר, ולעשות זאת תוך ליווי מבוגר בריא. אולם, מגבלות אלו אינן מונעות בהכרח את השימוש במכשיר. אנו ממליצים על התייעצות עם רופא ועל שימוש במכשיר רק אם קיבלתם את אישורו. אנו לומדים את ההשפעות של המכשיר על בעיות רפואיות שונות, כך שהמגבלות לעיל אולי אינן מקיפות דיין. לכן יש להיוועץ גם עם אדם ממקצועות הרפואה או עם פיזיותרפיסט.

## אחריות:

המשווק ייתקן או יחליף חלקים פגומים עקב פגמים בחומרים או בהליך העיצוב עד שנה לאחר הרכישה. זאת להוציא המקרים הבאים:

1. נזק שנגרם למכשיר עקב הפעלה לא נכונה או הובלה לא נכונה.
2. פירוק ותיקון ללא הרשאה של המכשיר.
3. אי ביצוע פעולות רגילות בהתאם להוראות השימוש.
4. עומס יתר מעבר ליכולת המוצהרת של מכשיר זה.
5. המוצר ניזוק בשל תנאי אחסון לא טובים או סביבת תחזוקה ירודה במיוחד.
6. נזק כתוצאה מנפילה או שבר.
7. אם לא תוכלו לספק הוכחה לגבי תאריך הרכישה.

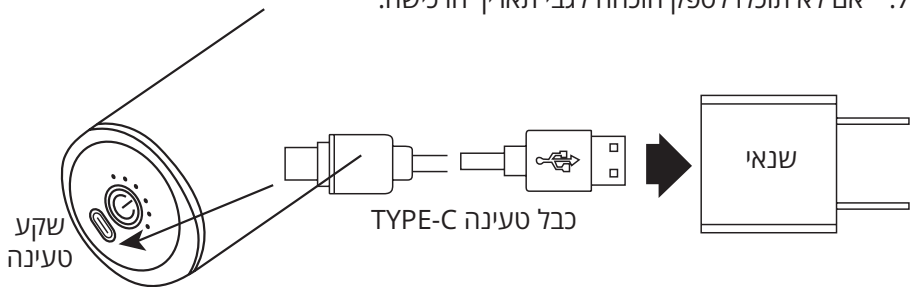

## טעינת המכשיר:

1. יש לחבר לשנאי (לא כלול) את הכבל טעינה TYPE-C אל פתח המכשיר.
2. לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, יש לטעון אותו למשך 3-4 שעות.
3. בעת טעינה יופעל תאורה לד אדומה אמורה על טעינת המכשיר, וכאשר הסוללה טעונה במלואה התאורת לד תהפוך לירוק.

שהסוללה מתרוקנת, יש לטעון אותה 3-4 שעות לערך עד שתתמלא. סוללה מלאה יכולה להפעיל את המכשיר לטווח של כ-60 דקות רצופות בערך. למען בטיחותכם, אין להפעיל את המכשיר בזמן שהוא נטען, וחל איסור על שימוש במכשיר בזמן הטעינה.

## הוראות בטיחות:

להפחתת סכנת התחשמלות, דליקה ופציעה גופנית, יש להשתמש במוצר בהתאם להנחיות הבאות:

1. המוצר מיועד לשימוש על ידי מבוגרים בלבד.
2. למניעת פציעה, אין לאפשר למכשיר לעסות ישירות את העור. על אזור העיסוי להיות מכוסה בבגד נקי ויבש, או במגבת יבשה ונקייה. יש ללחוץ את המכשיר כנגד הבגד ולהזיזו בעדינות. אין לעסות את אותו אזור למשך יותר מ- 60 שניות רצופות.
3. ניתן להשתמש במהירות ובלחץ גבוהים רק על רקמות רקות של הגוף, כל עוד לא נגרם כאב או אי נחת. אין להשתמש במהירות ובלחץ גבוהים על אזור הראש או על אזורים נוקשים (עם עצמות) כלשהם של הגוף.
4. יש לבחור בראש עיסוי מתאים, בהתאם לדרישות העיסוי השונות.
5. שימוש תדיר במכשיר במהירות ובלחץ גבוהים על אותו מקום עלול לגרום לשפשופים, כאב ואי נחת, יש להפסיק את השימוש במכשיר במקרה זה.
6. יש להרחיק אצבעות, שיער או חלקי כלשהם של הגוף מהמוט המאריך של המכשיר ומאזור הוצאת החום שבחלק האחורי של המנוע, כדי למנוע פציעות.
7. אין למקם חפצים כלשהם על גבי אזור הוצאת החום של המנוע.
8. אין לטבול את המכשיר במים. אין לאפשר למים להיכנס למכשיר דרך אזור הוצאת החום של המנוע.
9. אין להשליך את המכשיר ויש לטפל בו בעדינות.
10. יש לטעון רק עם המטען שהגיע עם המכשיר.
11. אין לבצע שינויים כלשהם במכשיר.
12. אין להפעיל את המכשיר ולטעון אותו ללא השגחה.

## תחזוקה:

1. יש לנגב את פני שטח המכשיר במטלית מעט לחה ולייבשו במטלית רכה.
2. בזמן אחסון המכשיר לפרק זמן ארוך או אריזתו לנסיעות, יש להכניסו לאריזה המקורית.

## אזהרה:

1. אין להיכנס עם המכשיר למים. יש להרחיק את המכשיר מנוזלים וממקורות חום. יש להקיפיד שפתח הוצאת החום של המנוע נקי ולא חסום.
2. אין לפתוח את ברגי המכשיר בכוחות עצמכם.
3. יש לכבות את המכשיר לאחר 60 דק' של שימוש, ולתת לו לנוח כחצי שעה לפני שימוש נוסף בו.
4. אין להשתמש במכשיר בזמן טעינתו.
5. אין להשתמש במכשיר זה על איברים פצועים ללא היוועצות מקדימה ברופא.

## מפרט טכני:

### כלול באריזה:

- אקדח עיסוי
- ראש עגול להרפיית השרירים
- ראש שטוח לקבוצות השרירים הגדולות
- ראש קליע לעיסוי עמוק במפרקים והשרירים הקטנים
- ראש רחב U לאזור הכתפיים, הצוואר והגב
- כבל טעינה TYPE-C
- הוראות הפעלה עברית
- אחריות שנה ע"י סירוס אלקטרוניקה

- מידות: (ג) 16 (ע) 9.5 (ר) 4.5
- 6 רמות מהירות
- זמן סוללה 60 דקות

## תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומוזים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.

הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

אחריות שנה יבואן רשמי  
למילוי הפרטים וכריסת  
נקודות שירות ארציות  
**סרקו את הברקוד**



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

רח' אגוז 4, א.ת חבל מודיעין ת.ד. 193, שוהם 7319900  
טל': 03-7355000 | פקס: 03-7355023 | [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)